



1968 - 2018 50년 동안의 혁신을 기념



Captair Smart

무덕트 흡 후드

실험실을 더 간편하고, 더 안전하게!



www.erlab.com

Captair Smart

무덕트 흡 후드

Erlab의 획기적 기술이 여러분의 안전을 보장합니다.

더 간단하고 더 안전하게 작동됩니다.

대부분의 실험실에
적용 가능한 Erlab만의
독특한 Flex 여과 방식

SMART 기술

라이트를 이용한 간단한
방법으로 후드 상태
확인 가능

필터 포화 감지 센서

표준 플러그인 65W
만으로도 작동되어
저전력 소비 가능

자동으로 모니터링
되는 공기 흡입 속도


6°기울어진 새시로
최적의 가시성과 인체
공학적 작업 공간을 제공
실험이 용이한 넓은 작업 입구



eGuard 앱으로
원격제어 및
모니터링 가능



실험실을 더 간편하고, 더 안전하게!

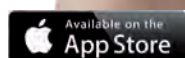

다양한 화학처리 과정에 필요한 사용자 보호기능과 탁월한 여과기능!
필터링 흡 후드 설계, 제조 및 연구 분야에 **50년의 전통과 전문성**을 가진 Erlab이 보증합니다.

스마트 기술: 신제품 Captair Smart 무다트 흡 후드는 간략하고 혁신적인 방식으로 현재 상태를 알리도록 설계 되어 있습니다. 스마트 기술은 라이트를 사용한 단순한 방법으로 후드가 안전하게 작동하고 있는지 알려주기 때문에 실험자가 실험에만 집중할 수 있습니다.



50년 된 Erlab의 케미컬
여과분야 전문성



LED감박입과 경고음을
통한 알람



원격으로 확인 할 수 있는
후드 상태 및 경고



국제 안전 기준을
완벽히 준수



완벽한 사후 관리
서비스

더 간편한 사용

- 후드 상태를 라이트로 알려 주는 스마트 기술이 사용되었습니다.
라이트가 켜져 있으면 후드가 안전하게 작동하고 있다는 표시입니다.
경고 상황 혹은 아래의 상황이 되면 라이트가 깜박입니다.
공기 흐름이 원활하지 않은 경우
팬 작동 오류
필터 포화
- eGuard 앱을 사용해 후드 모니터링 및 설정 변경을 원격 제어할 수 있고, 스마트폰, 태블릿, PC로 안전 여부 확인 및 즉각적인 경고 메시지를 받을 수 있습니다.

더 안전한 운용

- 여과 시스템은 가스, 용제, 분말 및 미립자를 걸러낼 수 있도록 설정 가능하며, 독성을 가진 증기나 냄새를 제거한 후 정화된 공기를 효율적으로 순환시키기 때문에 사용자와 실험실을 안전하게 지켜줍니다.
- 여과 효율 기준인 AFNOR NFX 15 211/ANSI Z9.5-2012을 충족합니다(등급 1 및 2)
- 용제, 산, 포름알데히드를 감지할 수 있도록 신형 센서가 추가 되었습니다.
공기 흡입 속도 모니터링 신형 전자 풍속계
- ESP 프로그램: Erlab사로부터 실험 과정에 사용이 적합하다는 승인이 내려지면, 제품과 함께 사용 인증서가 전달됩니다.

다양한 사이즈의 모델 선택 가능



외형 치수 (mm) (LxDxH)	
S321	800x556x968/1154
321	800x615x1106/1292



외형 치수 (mm) (LxDxH)	
391	1005x615x1106/1292



외형 치수 (mm) (LxDxH)	
481	1280x615x1106/1292



외형 치수 (mm) (LxDxH)	
632	1600x615x1106/1292



외형 치수 (mm) (LxDxH)	
392	1005x750x1332/1518



외형 치수 (mm) (LxDxH)	
483	1298x750x1332/1518



외형 치수 (mm) (LxDxH)	
633	1620x750x1332/1518



외형 치수 (mm) (LxDxH)	
714	1819x750x1332/1518



GreenFumehoods
an alternative to
ducted fume hoods



Smart Fume Hoods
for your routine
handlings




Captair Smart
Weighing Stations



Captair Smart
Storage cabinets



Captair Store
Storage cabinets

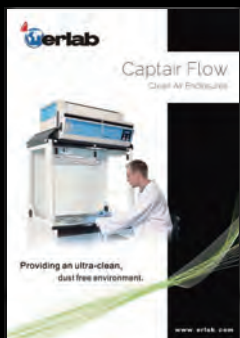

Captair Flow
Clean Air Enclosures



Captair Bio
PCR Workstations



Captair Pyramid
Portable Glovebox



Halo
Laboratory Air
Filtration system



Halo Sense
Lab Air Quality Sensor

유럽

erlab D.F.S S.A.S (프랑스)
Parc d'Affaires des Portes
BP 403
27104 Val de Reuil Cedex - France
Tel. : +33(0)2 32 09 55 80
Fax. : +33(0)2 32 09 55 90
E-Mail : Ventes@erlab.net

erlab S.L (스페인)
Pol. Ind. Sur
Pasaje Newton 3A
08754 El Papiol - Barcelona - Spain
Tel. : +34 93 673 24 74
Fax. : +34 93 673 24 76
E-Mail : Ventas@erlab.net

북아메리카

erlab, Inc. (미국)
388 Newburyport Turnpike
Rowley, MA 01969 - USA
Tel. : +1(978) 948-2216
Fax. : +1(978) 948-3354
E-Mail : CaptairSales@erlab.com

동남아시아

erlab SEA Sdn Bhd (말레이시아)
25 Jalan Firma
2/1 Kawasan Perindustrian - Tebrau
81100 Johor Bahru - Malaysia
Tel. : +60 (0)7 3 555 724
Fax. : +60 (0)7 3 552 810
E-Mail : erlab@erlab.com.my

www.erlab.com

아시아, 중동, 아프리카, 남아메리카

Kunshan erlab D.F.S Co.,Ltd
No.118 Feng Qin Rd.
KETD Kunshan
Jiangsu Province - China
Tel. : +86 (0)512 5781 4085
Fax. : +86 (0)512 5781 4082
E-Mail : Sales.china@erlab.com.cn

Your  **erlab distributor**

기정메디사이언스 (주)

서울시 노원구 노원로 15길 10
하계테크타운 A동 205호

TEL: 02-982-7471 FAX: 02-982-7473

Email: sales@kijeong.co.kr

Home page: www.kijeong.co.kr